


附件 1.

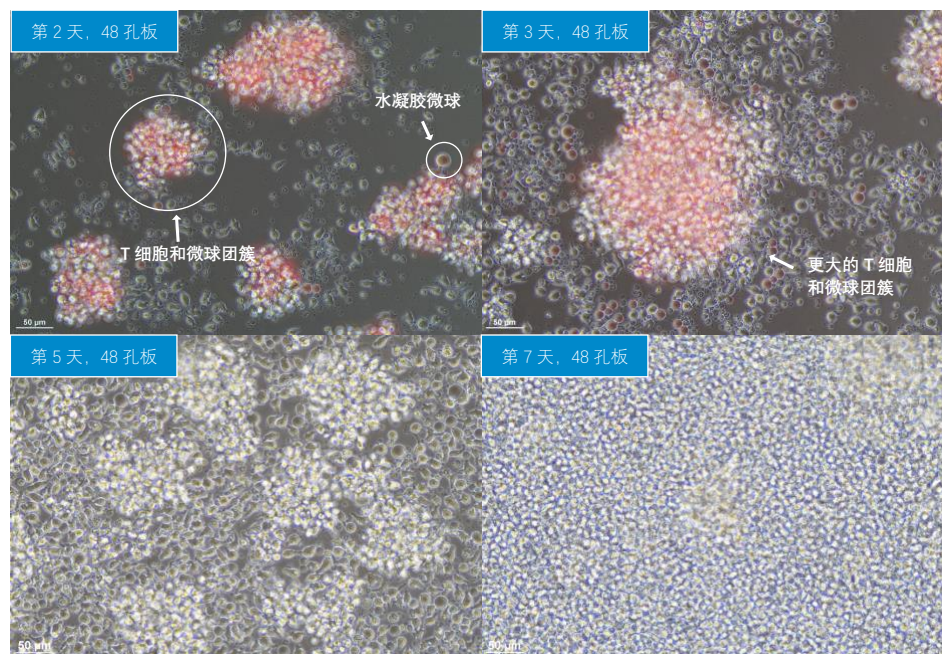


第 2 天, T 细胞开始与 Aim-Tconv 微球 (红色染料) 形成团簇。

第3天, T细胞-Aim-Tconv微球团簇持续增殖。

第5天, Aim-Tconv 微球自降解, T 细胞-Aim-Tconv 微球团簇分离。

第7天, Aim-Tconv 微球完全降解, T 细胞长满了整个培养皿。

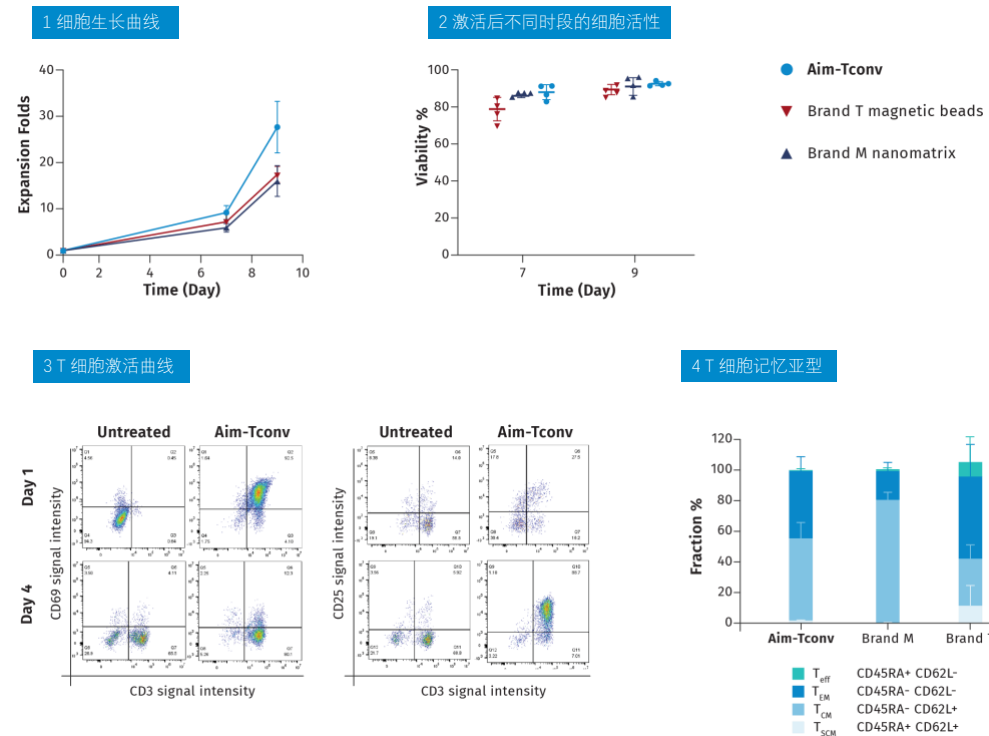

1. 使用 Aim-Tconv HMP, 和其他常用 T 细胞活化试剂以 1:1 HMP:PBMC 细胞比例激活后的 T 细胞增殖曲线对比图。PBMC 中只有 T 细胞能被激活并扩增, 扩增倍数 = 时间为 t 时, 活 T 细胞数 ÷ 初始 PBMC 细胞总数。
2. 使用 Aim-Tconv HMP, 和其他常用 T 细胞活化试剂激活细胞后的细胞活性变化对比图。
3. 早期标志物 (CD69) 和晚期标志物 (CD25) 的表达表明 PBMC 中的 T 细胞已激活。
4. 使用 Aim-Tconv HMP, 和其他常用 T 细胞活化试剂激活 T 细胞后的 T 细胞记忆亚型。

* n=4 来自健康人类捐献者, 误差条代表均值的 1 个标准差。